



会阴切开术和缝合训练模型

1019639 | P95



会阴切开术和缝合训练模型

简介

使用会阴切开术和缝合训练模型，可以展示专业的分娩侧切、伤口护理以及缝合操作技术。学生也可以借助该模型进行实际操作练习。

训练模型具有一个软质外阴插件，可以对其进行多次切割和缝合。可针对助产学和产科学训练领域的专业伤口管理标准（例如：缝合技术）进行练习和改善。

交货内容：

- 硅胶插件
- 底座
- 支架

技术参数

尺寸：

模型（高*宽*深）： 6 x 13 x 21 cm

放入袋子中（高*宽*深）： 8 x 25 x 17 cm

重量： 约 0.8 kg

工作条件：

工作温度： -10 ℃ 至+40 ℃


储存温度： -20 ℃ 至+60 ℃



功能特点：

会阴切开术训练模型的硅胶插件可进行多种切口训练（例如：会阴正中切开术、正中旁会阴切开术、会阴侧切术）。透过肛门可以触摸会阴区的肌肉结构（肛门外括约肌、会阴浅横肌、球海绵体肌）。

此外，可以模拟阴道、阴唇撕裂，并练习修补缝合和护理操作。肌肉和皮肤层可以一起缝合或者分别缝合。每个切口可以进行多次缝合训练。每次缝合训练之前必须去除缝线等材料（例如：使用手术剪、手术刀、镊子）。

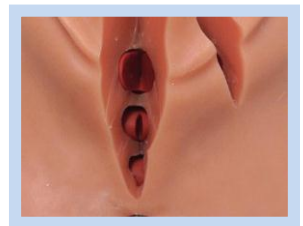

会阴切开术和缝合训练模型



组装

组装会阴切开术和缝合训练模型

- 可以将硅胶插件放入白色塑料底座中以确保其稳定性。此外，底座中间的凸出部分可以展示典型的切口裂开。可以使用所提供的折叠式支架对训练模型的角度进行调整。请将训练模型的橡胶支脚放在桌面等防滑表面上。
- 如有需要，去除硅胶插件的塑料包装，并将硅胶插件放入白色塑料底座中。
- 将支架的 3 个支架臂全部展开。黑色支架臂为上臂，其余两支为下臂。



图 1：会阴切开训练模型和底座



图 2：放入底座中的会阴切开术训练模型



图 3：放入底座中的会阴切开训练模型，带支架



图 4：放入底座中并放在支架上的会阴切开训练模型

清洁和护理

可以使用湿布清洁模型的表面。

在储存之前，请确保训练模型已完全干燥。

订货单

XP95-001 / 1019640 会阴切开术训练模型替换组件

XP95-002 / 1019641 会阴切开术训练模型替换组件（一组 5 件）

可选件：

XP95-003 / 1020767 会阴切开术和缝合训练模型的缝合组件（手术缝合线、持针器、手术剪、镊子、手术刀柄、刀片）。