


Motor Wankel, transparente 1002994

Instrucciones de uso

04/12 JS

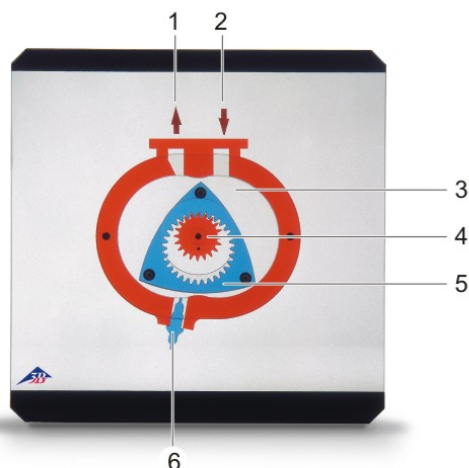

- 1 Salida
- 2 Entrada
- 3 Cámara
- 4 Árbol de excéntrica
- 5 Émbolo de rotación
- 6 Bujía de encendido

1. Descripción

El motor Wankel o motor de de émbolo circular trabaja según el principio de cuatro tiempos.

El émbolo de rotación triangular curvado transmite la fuerza y controla los procesos de cambio de la mezcla.

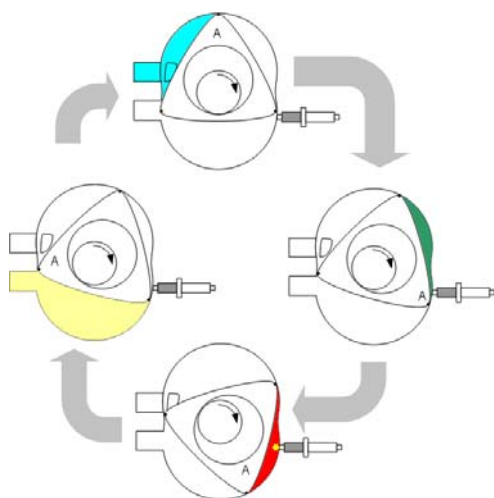


Fig. 1: Tiempos de trabajo del motor Wankel:
Aspirar (arriba), Comprimir (a la derecha),
encender (abajo), Expeler (a la izquierda)

2. Manejo

Se recomienda adicionalmente:

Retroproyector (230 V, 50/60 Hz) 1003264
ó
Retroproyector (115 V, 50/60 Hz) 1003263

- Se coloca la transparencia sobre el retroproyector.
- Con la mano se pasa secuencialmente a las posiciones que corresponden a las fases de trabajo.

